


★定量乾粉吸入劑

肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑 Foster Nexthaler

如何使用耐舒樂（小紅帽）？

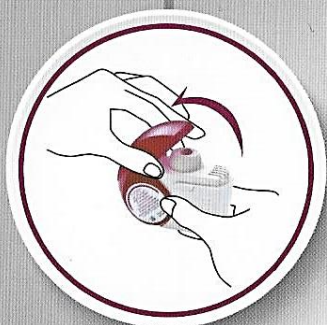

開

- 把蓋子打開到底
- 朝吸入器以外的地方吐一口氣




吸

- 雙唇確實含著吸嘴，並以長而穩定的方式深吸一口氣。
- 聽到“喀”的一聲，代表已正確吸入藥物。請持續吸氣1-2秒。
- 吸氣完畢後，移去吸入器並閉緊雙唇，然後盡可能的閉氣(至少3-4秒)



關

- 關閉蓋子，可發現劑量窗格數字減少
- 如有需要可使用乾面紙清潔吸入器吸口，勿用水清洗吸入器

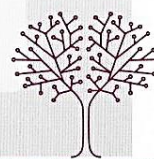

耐舒樂
FOSTER
NEXThaler
Becloethasone+Formoterol

如何確保您完整且正確吸入藥物？



吸入藥物時

聽

您會聽到“喀”的一聲



吸入藥物時

嚐

您會感覺到嘴裡有些許甜甜的味道。



吸藥完畢時

看

請蓋上外蓋，同時檢查劑量窗格的數字是否有減少。

► ELLIPTA 易利達乾粉吸入器 (不含類固醇) : Anoro Ellipta、Incruse Ellipta

安肺樂易利達 Anoro Ellipta

ANORO ELLIPTA

吸入器使用說明

本說明書僅提供有被處方此藥品之患者

正確使用 ANORO ELLIPTA 吸入器

ELLIPTA 吸入劑操作步驟


想看ANORO ELLIPTA操作影片嗎?請掃描右方QR code



中文版



英文版

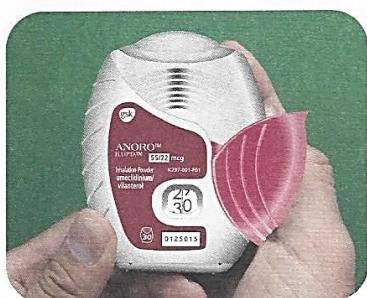

1 打開

扳開要聽到「喀」一聲，才有成功上藥



2 吸入

A. 先向外吐一口氣，勿朝吸嘴吐氣。

B. 將吸嘴放入嘴唇內，緩而長的**吸**一口氣。

C. 吸氣完畢後自口中移去吸入器，緊閉雙唇
接著盡可能地閉氣。(至少閉氣3-4秒)



3 關上

使用完畢切記將吸入器蓋子**關**上

使用注意事項



⊗ 請勿重複開關



⊗ 注意嘴巴
不要遮住通氣口



⊗ 注意手指
不要遮住通氣口

⊗ 遵醫囑性以及吸入裝置操作的正確性對藥物的治療成效十分重要。

⊗ 提醒您，記得定期回醫院拿藥並與醫護人員確認自身吸入裝置操作是否正確。

GSK 關心想你

請務必詳閱仿單內使用操作說明，如果對藥物使用有任何問題或不確定使用方法，請洽詢醫師、護理師或藥師。
Reference: ANORO 仿單


ANORO ELLIPTA
umeclidinium/vilanterol
breathe...

英克賜易利達® Incruse Ellipta

如何使用


要吸藥時才可以打開蓋子，如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，就會損失一次藥物劑量。

1 打開

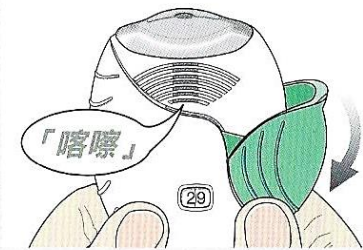


- 把蓋子往下推，直到聽見「喀嚓」聲。
- 吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

2 吸入

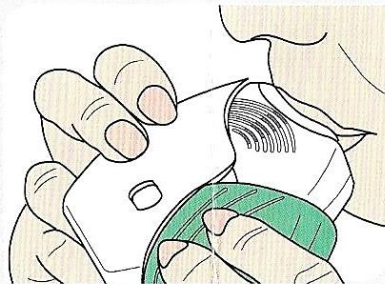

- 雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。
- 此時請以長而穩定的方式深吸一口氣，然後閉氣至少3-4秒。請勿由您的鼻子吸入。

3 關上

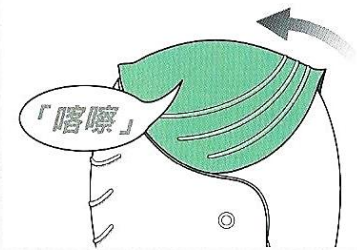

- 取出吸入器，慢慢吐氣。
- 將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴。
- 如有需要可使用乾面紙清潔吸口。

請務必詳閱患者須知，如果對藥物使用有任何問題或不確定使用方法，請洽詢醫師、護理師或藥師。
Reference: Incruse 仿單

INCRUSE ELLIPTA
umeclidinium
RAISING EXPECTATIONS IN COPD


► ELLIPTA 易利達乾粉吸入器 (含類固醇)：Relvar Ellipta、Trelegy Ellipta

潤娃易利達乾粉吸入劑 Relvar Ellipta

如何使用


要吸藥時才可以打開蓋子，如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，就會損失一次藥物劑量。

1 打開

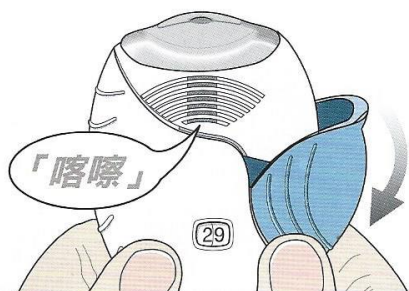


- 把蓋子往下推，直到聽見「喀嗒」聲。
- 吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

2 吸入

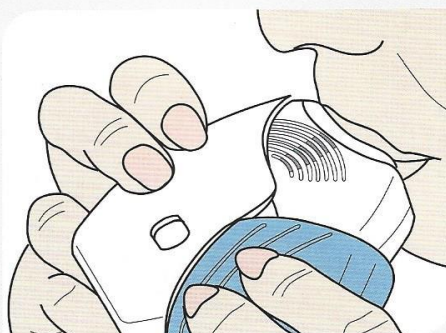

- 雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。
- 此時請以長而穩定的方式深吸一口氣，然後閉氣至少3-4秒。請勿由您的鼻子吸入。

3 關上

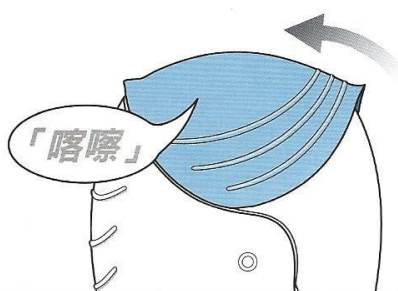

- 取出吸入器，慢慢吐氣。
- 將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴。
- 如有需要可使用乾面紙清潔吸口。



- 吸藥後，務必用清水漱口，且不可吞下，這是為了幫助降低發生口咽念珠菌病的風險。

請務必詳閱患者須知，如果對藥物使用有任何問題或不確定使用方法，請洽詢醫師、護理師或藥師。

請向醫護人員查詢有關詳情，此衛教資料須由醫護人員提供給病患
Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies
©2020 GSK group of companies or its licensor
不良事件通報程序：通報電話：(02) 23126836/ 郵箱：oax40892@gsk.com
詳細處方資訊請參閱 葛蘭素史克藥廠 地址：100台北市忠孝西路一段66號24樓

RELVAR ELLIPTA
(fluticasone furoate and vilanterol inhalation powder)

INNOVIVA



NP-TW-FFV-LBND-200001 Date of preparation: Jan 2020

TRELEGY ELLIPTA

吸入器使用說明

本說明書僅提供有被處方此藥品之患者
正確使用 TRELEGY ELLIPTA 吸入器

ELLIPTA 吸入劑操作步驟

想看TRELEGY ELLIPTA操作影片嗎?請掃描右方QR code



中文版



英文版



1 打開

扳開要聽到「喀」一聲，才有成功上藥



2 吸入

- A. 先向外吐一口氣，勿朝吸嘴吐氣。
- B. 將吸嘴放入嘴唇內，緩而長的吸一口氣。
- C. 吸氣完畢後自口中移去吸入器，緊閉雙唇
接著盡可能地閉氣。(至少閉氣3-4秒)



3 關上

- A. 使用完畢切記將吸入器蓋子關上
- B. 此藥物含有吸入型類固醇，用完請漱口

使用注意事項



⊗ 請勿重複開關



⊗ 注意嘴巴
不要遮住通氣口



⊗ 注意手指
不要遮住通氣口

- ⊗ 遵醫囑性以及吸入裝置操作的正確性對藥物的治療成效十分重要。
- ⊗ 提醒您，記得定期回醫院拿藥並與醫護人員確認自身吸入裝置操作是否正確。

GSK 關心您

如何使用 Symbicort® Turbuhaler® 吸入器

第一次使用 Symbicort <剛拆封>

先左轉到底，聽到喀一聲後，再重複圖示 2 動作一次，
聽到“第二次喀聲”才有藥。

* 完成開封動作後每次使用時，請依照下列四步驟操作 *



1

開

旋轉開瓶蓋。



2

喀


手持瓶身，紅色底盤先右轉到底再左轉
直到聽到“喀”一聲，即可。



3

吸

深深吸一口藥。
閉氣 5 秒即完成 1 次的用藥。

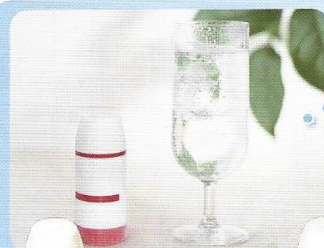

4

漱

關上瓶蓋，並請漱口。



Pulmicort
底盤為
(棕色)

Symbicort
底盤為 (紅色)

Oxis
底盤為 (綠色)

Bricanyl
底盤為
(藍色)

【注意事項】

1. 請勿對吸嘴吐氣。
2. 計數示窗開始出現紅色時表示剩下 20 個劑量，當示窗顯示全紅色時僅剩 10 個劑量，建議請儘速回診。
3. 當您搖晃吸入器所聽到的“沙沙”聲並非由藥物產生，而是乾燥劑所產生。
4. 如醫師指示須吸入 2 次劑量時，請重複 2-3 步驟。

本使用指南為臺灣阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 公司提供已處方吸必擴使用之病患衛教使用，
並無法取代專業醫療。如對呼吸道疾病或藥物的使用或相關資訊，請諮詢您的醫療專業醫師或衛教師。

假如在尚未拿到下一個吸必擴處方前， 我已用完吸必擴吸入器怎麼辦？

在您的吸必擴吸入器上有劑量指標，您能夠觀察到您的藥物即將使用完畢，而及時更新您的處方。更多相關訊息請參考吸必擴吸入器盒內的產品訊息說明書。

劑量計數窗口

清楚呈現使用狀況，
當窗口出現的指標背景是紅色，
代表劑量即將使用完畢；
當數字0在窗口中間時，
請更換吸必擴吸入器。

