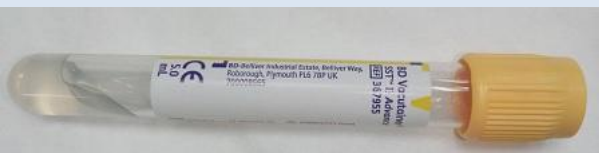


檢驗項目	Aniti-nuclear antibody(ANA)			版本 2025.10.01	
中文名稱	抗核抗體				
英文名稱	ANA				
適應症	<p>ANA 抗核抗體為自體免疫抗體，常用的方法有酵素免疫分析法(EIA)及螢光免疫分析法(IFA)，IFA 法在判讀時須以螢光顯微鏡觀察，其效價強度及螢光分型有助於自體免疫疾病的分類及診斷。IFA 法可分為五型，包括：均質型、周邊型、斑點型、核仁型、著絲點型。</p> <p>ANA 陽性不能確診任何疾病，但 SLE 患者有 86%~100%會呈現陽性。其他非狼瘡性結締組織病包括皮肌炎、類風濕關節炎、硬皮病、乾燥綜合症、血管炎等 ANA 陽性率約為 50%。</p> <p>另外在少數正常人、肺結核、惡性腫瘤也會呈現弱陽性結果。</p>				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍					
採檢容器和檢體量				黃頭管	3ml 全血
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間		
	本院 2 樓檢驗科	8:00 - 21:00	8:00 - 12:00		
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156		
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。</li> <li>運送條件：室溫</li> </ul>				
健保代碼與給付點數	健保碼	12053C	點數	330 點	
檢驗方法及說明					